



Cilj:

- Varna in kakovostna obravnava pacienta
- Verodostojnost rezultata testa

Potrebna dokumentacija:


- Zvezek za dokumentacijo opravljenih testov
- Laboratorijski list

Potrebni pripomočki:

- Panel testi za urinske vzorce
- Testi na slino
- Strojni testi
- Uporaba lončka s temperaturno skalo
- Rokavice
- Delovna obleka
- Delovne površine
- Računalnik
- Rokavice za enkratno uporabo
- Toaletni prostor s screenom
- Umivalnik s tekočo vodo in milom ter brisačami
- ...

Kazalniki kakovosti:


- Število podvajanj testov
- Število manipulacij
- Število neželenih dogodkov
- Število spornih rezultatov
- Število spornih vzorcev

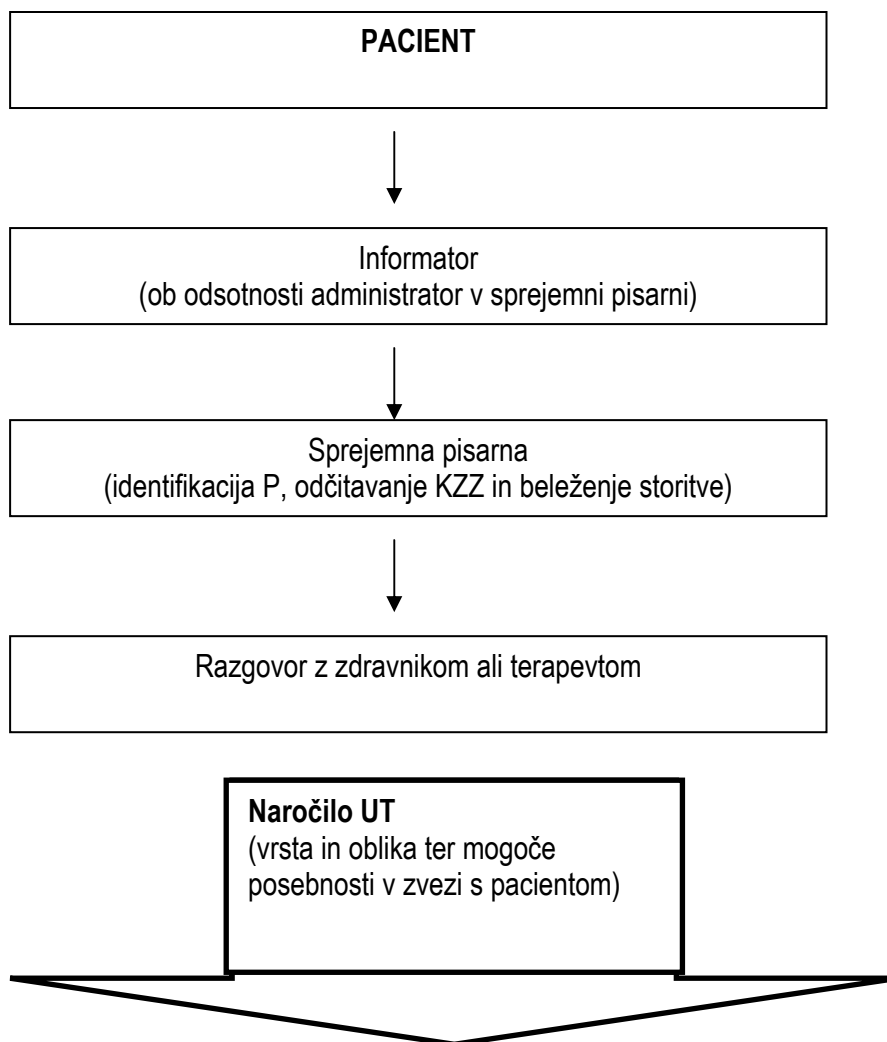

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS

1. Test na PAS se opravi po standardu, ki je v veljavi na CZOPD:

- Identiteta P
- Psihofizična priprava P na poseg (seznanitev P s postopkom; fizična priprava pacienta, ki prepreči potvarjanje vzetega vzorca)
- Priprava delovnega okolja (urejeno in čisto delovno okolje ...)
- V primeru polnoletne osebe se vedno vpraša ali želi nadzor izvajalca ZN istega spola
- V primeru mladoletne osebe NUJNO zagotovimo nadzor izvajalca istega spola

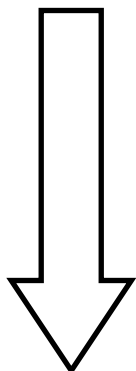

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)

Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS

2. Odvzem in verodostojnost vzorca na PAS (urin, slina)

- P med postopkom odvzema STALNO in NEPOSREDNO opazujemo (vedenje: nenavadno gibanje, znaki intoksikacije ...)
- Uporaba lončka s temperaturno skalo je 35 – 36° C → URIN
- Minimalna količina vzorca je 75 ml → URIN
- Nadzor organoleptičnih lastnosti urina (barva, vonj, primesi, penjenje)




ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)

Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS

3. Izvedba testa na PAS

- UT lahko opravimo na stroj ali uporabimo hitro imunokemične teste (na slino ali na urin)

UPOŠTEVAMO NAVODILA PROIZVAJALCEV ZA PRAVILNO ZVEDBO TESTOV

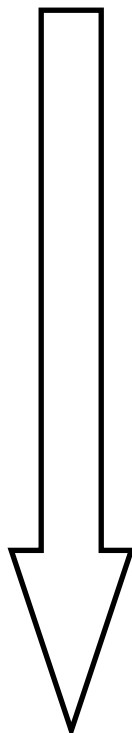


ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)

Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS

4. Interpretacija testov

- Izvajalec v laboratoriju pravilno odčita rezultat testa
- Panel teste na urin odčitamo po največ 3 - 5 minutah, a ne kasneje kot po 10 minutah oziroma upoštevamo navodila proizvajalcev
- Test je **NEGATIVEN**, ko se formirajo rdeče črtice na testni površini, vključno s kontrolno črtico.
PRI TEM JAKOST RDEČE ČRTICE NA TESTNI POVRŠINI NI POMEMBNA!
- Test je **POZITIVEN**, ko se formira samo kontrolna rdeča črtica.
- Test je **NEVELJAVEN**, ko je odsotna zgornja kontrolna rdeča črtica.

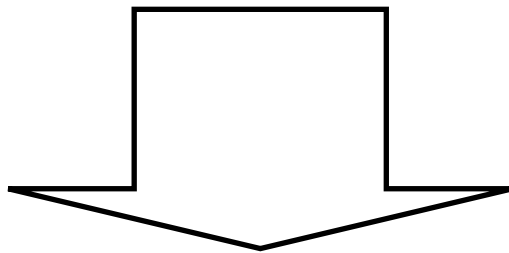

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)

Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS

5. Sporočanje rezultatov in dokumentiranje

- Rezultat testa se sporoči vedno naročniku testa (zdravnik ali terapevt), ki se o njem pogovori s pacientom.
- Rezultat testa se lahko sporoči tudi pacientu. Če se ta z izidom ne strinja, se vzorec shrani v hladilniku do razgovora s terapevtom.
- Izvajalec testa NIKOLI ne interpretira rezultata testa pacientu.
- Rezultat testa evidentiramo v Laboratorijski list in Zvezek za dokumentacijo opravljenih testov
- Rezultati testov so na vpogled samo osebam, ki so pooblašene za pacienta.

Če sumimo, da pacient pri dajanju vzorca urina manipulira (tuj urin, potvorjen urin ...):

- **Evidenca dogodka**
- **O dogodku obvestimo terapevta**
- **Dogodek se zavede v zdravstveni dokumentaciji**

PO POTREBI SE ODVZEM VZORCA PONOVI!